


# Low Vision International

## Magnilink TAB

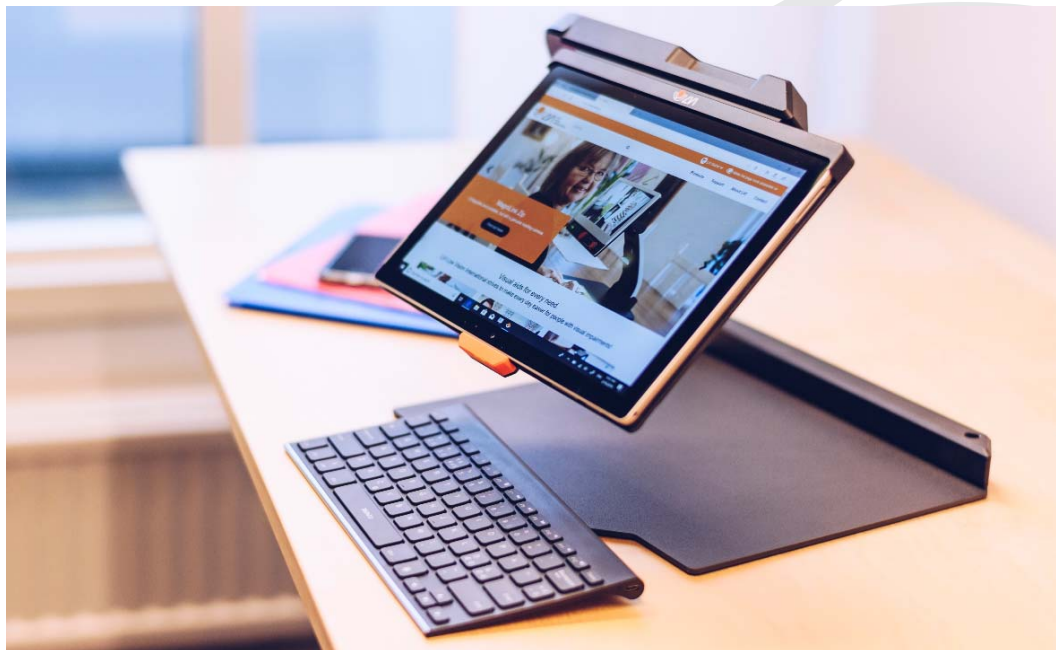

De MagniLink TAB is ontwikkeld om het dagelijks leven gemakkelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. De TAB is gemakkelijk mee te nemen naar diverse locaties en is in enkele seconden startklaar. Het systeem focusteert volledig automatisch, beschikt daarnaast over diverse kleurenschema's en kan gemakkelijk in en uit zoomen om tekst te vergroten. Bovendien kan de Magnilink TAB tekst hardop voorlezen.

### Een complete oplossing

De Magnilink TAB is een totaaloplossing gebaseerd op een Microsoft Surface pro tablet met een groot 12,3" scherm. Hiermee beschik je over een complete mobiele oplossing voor papieren en digitale documenten. De TAB is geschikt voor elke kleine taak, maar is zeker geschikt voor langdurig lezen. De Magnilink TAB is te gebruiken als beeldschermloep met ingebouwde OCR (tekstherkenning), of als een complete computer.

Voor het lezen van teksten kan er gebruik gemaakt worden van de interne camera van

de tablet. Bovendien kan de hoogwaardige externe camera gebruikt worden voor het lezen van teksten op grotere afstanden. Deze eigenschappen maken de Tab breed inzetbaar voor lezen, schrijven en het bekijken van objecten in iedere denkbare situatie.

### Aansluiten en communiceren

De Magnilink TAB is gemakkelijk te verbinden met elk WIFI netwerk en is bovendien te verbinden met verschillende Bluetooth accessoires. Een internetbrowser en andere applicaties zijn met een simpele aanraking te openen. De Magnilink TAB brengt toegankelijke communicatie met de rest van de wereld binnen handbereik.

### Flexibiliteit

De Magnilink TAB heeft een touchscreen met extra grote knoppen, speciaal voor slechtzienden. De TAB kan bediend worden door op het scherm te vegen of met een bluetooth toetsenbord te verbinden. De functionaliteit is



Bovendonk 27  
4707 ZH Roosendaal  
tel. 0165 536156  
info@babbage.com  
www.babbage.com

---

## Magnilink TAB

---



voor iedere individuele gebruiker aan te passen. Als bepaalde functies niet gebruikt hoeven te worden kan de bijbehorende bediening verwijderd worden.

vrijwel gelijk mee aan de slag kunt. Dit maakt de TAB ideaal om te gebruiken op school, thuis of op het werk. Een kwestie van uitklappen en aanzetten.

### Luister naar je tekst

Dankzij de krachtige software van de Tab met ingebouwde OCR en spraakuitvoer wordt gescande tekst omgezet naar bewerkbare tekst en voorgelezen met een stem van hoogwaardige kwaliteit. Er zijn verschillende weergavemodi beschikbaar om de leesnelheid te verhogen, langdurig te lezen en gemakkelijker lezen mogelijk te maken.

### Een kwestie van uitklappen en aanzetten.

Waar je ook bent, laat de Magnilink TAB zich, vanwege de eenvoudige opvouwbaarheid en laag gewicht, snel inpakken en meenemen. De Magnilink TAB start snel op waardoor je er

### Technische specificaties

- Tablet and stand
- Model: Microsoft Surface Pro
- Schermgrootte: 12.3"
- Resolutie: 2736 x 1924
- Afmetingen opgevouwen: 365 x 300 x 30mm (B x D x H)
- Afmetingen uitgeklaapt: 230 x 310 x 350 mm (B x D x H)
- Gewicht: 2,9 kg
- Externe afstand camera
  - Vergroting: 0,8-40x
  - Verversingsfrequentie: 60 Hz
  - Lengte: Camera en arm: 620 mm
  - Gewicht: 700 g



Bovendonk 27  
4707 ZH Roosendaal  
tel. 0165 536156  
info@babbage.com  
www.babbage.com